



## Pasirūpinkime savo šypsena!

Puikiai žinome, kaip sudėtinga valyti dantis su nejudančiais breketais. Nešvarumai greitai susikaupia aplink breketus, ko pasekoje gali formuotis kariesas, dantenų uždegimas ir blogas kvapas. Vien tik dantų šepetėlio dažnai neužtenka, patariame naudoti specialius valymo prietaisus, kurie padeda daug lengviau išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas. Jūsų odontologas gali rekomenduoti Jums tinkamus prietaisus ir pamokyti, kaip teisingai jais naudotis. Rūpestingas valymas yra būtinas norint sumažinti demineralizacijos riziką.

Tepe siūlo plačią įvairovę specialių valymo priemonių, kurios pritaikytos specifinių poreikių turintiems pacientams bei nešiojantiems ortodontinius įtaisus.



© TePe Munhygienproduktter AB. 2009.

TePe – mes rūpinamės jūsų sveika šypsena

TePe yra švedų įmonė, gaminanti ir parduodanti aukštos kokybės burnos higienos produktus nuo 1965 m. Visas dizainas, patobulinimai ir nauja produkcija yra kuriami Malmės mieste, Švedijoje. Dėl nuolatinio produktų tobulinimo ir bendradarbiavimo su dantų ekspertais, TePe tapo lyderiu dantų priežiūros srityje. Šiandien mūsų dantų krapštukai, dantų ir tarpdančių šepetėliai yra parduodami 50-tyje pasaulio šalių.

**Norėdami gauti daugiau informacijos, aplankykite mūsų svetainę [www.tepe.com](http://www.tepe.com).**

**TePe Munhygienproduktter AB**  
Bronsaldersgatan 5,  
SE-213 76 Malmö,  
Švedija  
Tel. +46 (0) 40-670 11 00,  
faks. +46 (0) 40-670 11 11  
[info@tepe.com](mailto:info@tepe.com)  
[www.tepe.com](http://www.tepe.com)

**Platintojas Lietuvoje:**  
**Herba Humana UAB**  
Konstitucijos pr. 9-123,  
LT-09308 Vilnius, Lietuva  
Tel. +370 5 2 75 41 27,  
faks. +370 5 2 75 41 28  
[dalia@arbatos.lt](mailto:dalia@arbatos.lt)  
[www.herbahumana.lt](http://www.herbahumana.lt)

**TePe**<sup>®</sup>  
We care for healthy smiles

Breketų priežiūra  
Paciento vadovas

# Tepe dantų šepetėliai

Kasdienis valymas tuo pačiu dantų šepetėliu yra dantų higienos pagrindas. Tepe dantų šepetėliai turi patogias rankenėles, minkštus šerelius ir mažas šepetėlių galvutes, kad būtų lengviau pasiekti visus dantų paviršius.



Select šepetėliai yra su piešiniais Tepe Graphic.



## TePe Select™

TePe Select yra dviejų dydžių. Pasirinkus Compact su mažesne šepetėlio galvute, lengviau pasieksite sunkiai pasiekiamas vietas.



## TePe Supreme™

Dviejų lygių dantų šepetėlio šereliai puikiai tinka pacientams su ortodontiniais įtaisais. Ilgesni, plonėjantys šereliai pasiekia kiek giliau tarp dantų, tuo tarpu trumpesni švelniai nuvalo kitus paviršius, taip pat ir po vielutėmis.



## Tepe ortodontinis šepetėlis

Dvi šerelių eilės ir labai siaura galvutė sukurta palengvinti valymą sunkiai pasiekiamose vietose po breketų lanku.

- Valykite dantis su minkštu dantų šepetėliu ir fluoro dantų pasta du kartus per dieną.
- Naudokite specialų šepetėlį sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.
- Venkite saldžių gėrimų ir užkandžių tarp valgių.
- Papildomai apsaugai nuo karieso išvalius dantis naudokite Tepe fluoro gelį.

Daugiau informacijos rasite [www.tepe.com](http://www.tepe.com)

## Šepetėlio galvutės dėkliukas patogus kelionei

Maža, praktiška kelioninė dėžutė tinka visiems Tepe šepetėliams. Pralaidi orui, greitai nusausinami šepetėlio šereliai.




## Interspace – sunkiai pasiekiamoms vietoms

Šepetėlis su palenкта galvute bei siaurėjančiu pluoštu pagerina prieigą sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip prie pasakutiniųjų dantų, ties danties išsišakojimu. Interspace šepetėlis tinkamas breketų bei karūnėlių priežiūrai.



## Compact Tuft – mažas ir plonas

Kompaktiškas šepetėlis lenkta galvute, trumpais labai minkštais šereliais. Mažas ir lankstus šepetėlis, lenktu kakleliu, padeda pasiekti sunkiai prieinamas vietas.

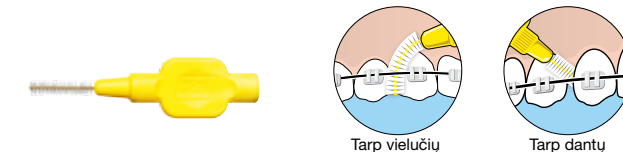


Tarp vielučių

Tarp dantų

## Tepe tarpdančių šepetėliai

Tarpdančių šepetėliai yra naudojami valyti ne tik tarpdančius, bet ir aplink breketus bei po vielutėmis. Tepe tarpdančių šepetėliai yra įvairių dydžių, pritaikytų skirtingo dydžio tarpdančiams.

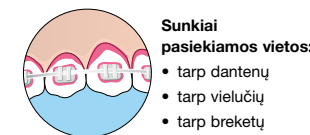

Sunkiai pasiekiamos vietos:

- tarp dantų
- tarp vielučių
- tarp breketų

## Tepe tarpdančių gelis su fluoru

Nauja priemonė apsaugoti tarpdančius nuo karieso yra Tepe tarpdančių gelis su fluoru, specialiai pritaikytas naudoti su Tepe tarpdančių šepetėliu. Gelis tepamas ant dantų šepetėlio arba ant tarpdančių šepetėlio. Gelį naudokite po dantų valymo. Gelio nenuplaukite vandeniu.